



Nasale
Probennahme
&
vorgefüllte
Pufferampullen

NADAL® COVID-19 Ag Test

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoprotein-Antigenen in menschlichen nasalen, naso- und oropharyngealen Proben

COVID-19-Antigentest auch mit nasalen Abstrichen möglich

Neue Studienergebnisse zeigen, der NADAL® COVID-19 Ag Test kann auch mit nasalen Proben, deren Entnahme für Patienten deutlich angenehmer ist, durchgeführt werden.

Der NADAL® COVID-19 Ag Test weist das Virus direkt nach, indem er auf das Vorhandensein spezifischer Proteine des SARS-CoV-2 prüft. Damit schließt der Antigennachweis eine diagnostische Lücke. Das Nukleokapsid-Protein (N) ist ideal für diesen Nachweis geeignet, da es im Virus sehr häufig vorkommt und ausreichend spezifisch für SARS-CoV-2 ist. Es gehört zu dessen 4 wichtigsten Strukturproteinen und ist an der Replikation, Transkription und Verpackung des viralen Genoms beteiligt.


NADAL® COVID-19 Ag Test

Der NADAL® COVID-19 Ag Test ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow Format zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoproteinen in humanen nasalen, naso- oder oropharyngealen Proben. Der Schnelltest ist als Hilfsmittel bei der Diagnose von Infektionen mit SARS-CoV-2 vorgesehen. Es ist zu beachten, dass die Konzentration der viralen Nukleoprotein-Antigene im Verlauf der Er-




krankung schwanken und unter die Nachweisgrenze des Tests fallen kann. Eine mögliche Infektiosität der Testpersonen kann aufgrund negativer Testergebnisse nicht ausgeschlossen werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ Optimierter Testprozess
- ✓ Jetzt auch nasale Proben möglich
- ✓ Vorgefüllte Pufferampullen
- ✓ Hohe Spezifität
- ✓ Hohe Sensitivität
- ✓ Schnelle und zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten
- ✓ Lagerung bei Raumtemperatur
- ✓ Alle Testkomponenten – einschließlich sterilem Abstrichtupfer – sind enthalten
- ✓ Keine Kreuzreaktivität mit saisonalen Coronaviren (wie hCoV-229E, -NL63 oder -OC43) beziehungsweise Influenza-Viren (wie Influenza A/B)

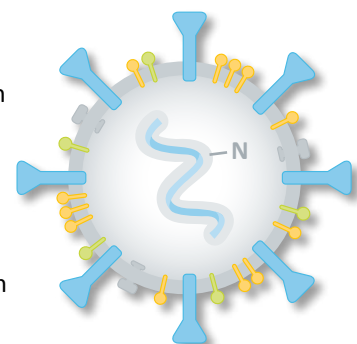


Probennahme

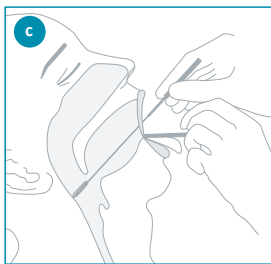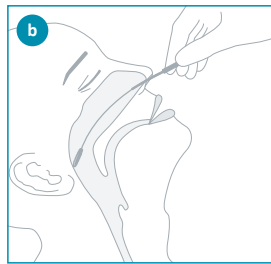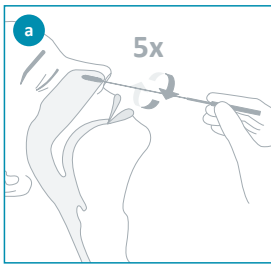


- a Nasaler Abstrich oder
- b Nasopharyngealer Abstrich oder
- c Oropharyngealer Abstrich


Eine diagnostische Lücke schließt sich – Nachweisfenster ähnlich zur PCR

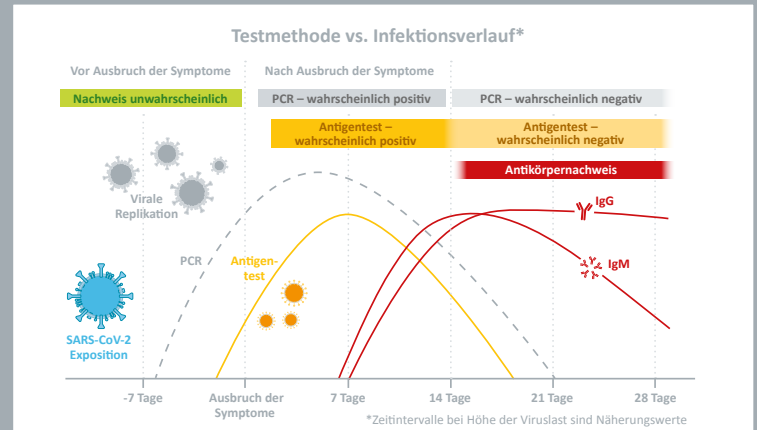

Testdurchführung

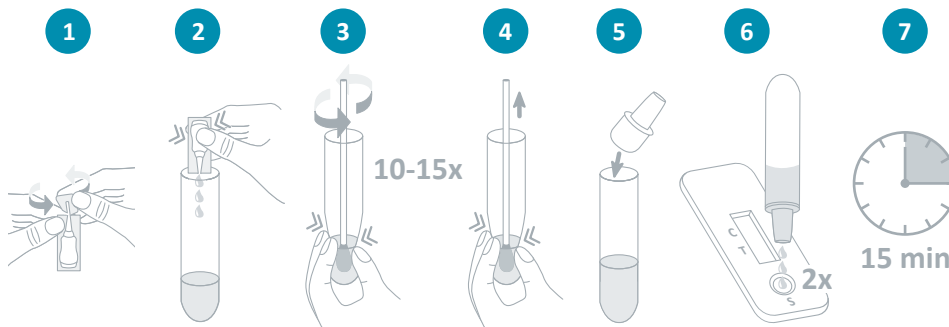

Testauswertung

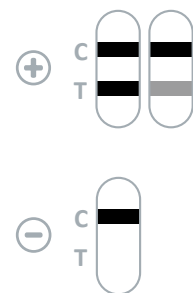

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

NADAL® COVID-19 Ag Test

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Antigenen in menschlichen nasalen, naso- oder oropharyngealen Proben

Produkt	Probenmaterial	Sensitivität	Spezifität	Artikelnummer	Packungsgröße
NADAL® COVID-19 Ag Test	Nasales, naso- oder oropharyngeales Probenmaterial	≤ 97,56 %* *Ct-Bereich 20-30	> 99,9 %	243103N-20	20 Tests pro Packung

Im Lieferumfang enthalten sind Testkassetten • sterile Abstrichtupfer • Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze • Reagenzienhalter • vorgefüllte Pufferampullen • Gebrauchsanweisung

Gerne beantwortet unser **Vertriebsteam** alle Ihre Fragen unter
Tel.: +49 941 29010-0 oder +49 2841 99 820-0 und per E-Mail vertrieb@nal-vonminden.de
Weitere Informationen:



We help you care!

- Schnelltests
- Labordiagnostik
- Laborservice
- Beratung & Service